

DONJOY[®]

DonJoy ActyLight[®]

L'attelle qui s'ajuste et s'oublie



enovis[™]



DONJOY®

DonJoy ActyLight®

L'attelle qui s'ajuste et s'oublie

La commodité et le confort de la chevillère DonJoy ActyLight® permettent aux patients d'oublier qu'ils la portent. Sa conception avec enfilage facilité "step-in" et son système de laçage assurent un ajustement rapide et sûr, complété par une paire de montants latéraux anatomiques amovibles. Leur adaptabilité simple permet une utilisation en phase aiguë et chronique, de sorte que l'attelle DonJoy ActyLight® peut accompagner les patients tout au long de leur rééducation.

Indications

DonJoy ActyLight® est conçue pour apporter soutien et stabilisation à la cheville.

- Prise en charge initiale des instabilités chroniques de la cheville
- Entorses légères à modérées des ligaments latéraux
- Lésions syndesmotiques isolées (stade 1)
- Retour au sport, prévention de nouvelles blessures
- Instabilité ligamentaire
- Prévention de l'inversion / éversion

Caractéristiques et bénéfices



La conception "step-in" avec ouverture arrière permet une mise en place simple, rapide, et sans contrainte pour la cheville ainsi qu'une absence de conflit au niveau du tendon d'Achille.



Le mécanisme de verrouillage des lacets permet un serrage précis, aide à maintenir un ajustement cohérent et autorise un relâchement rapide.



Les tissus légers et respirants aident le pied à rester au frais et au sec pour faciliter l'observance.



Les sangles intuitives en forme de 8 permettent de contrôler l'inversion et l'éversion.



Les montants latéraux à contour anatomique offrent une stabilité articulaire et peuvent être repositionnés pour s'adapter aux hauteurs des malléoles.




S'insère confortablement à l'intérieur d'une chaussure de sport, ce qui permet aux patients de rester actifs.



La conception modulaire permet d'adapter facilement le support à une utilisation aiguë ou chronique en retirant les montants latéraux.





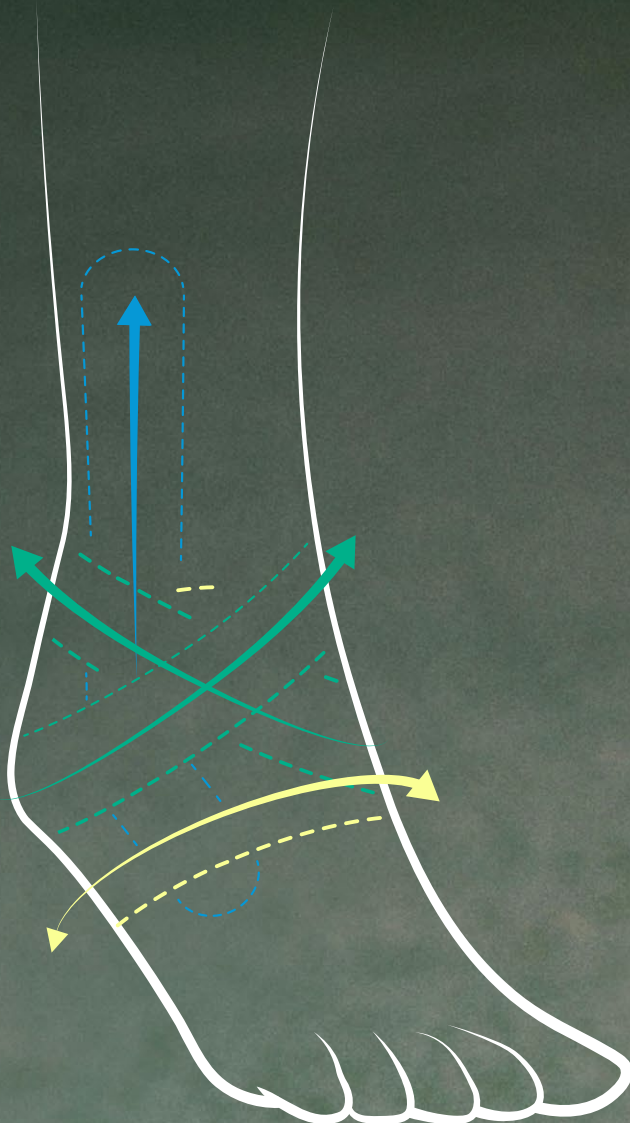

Fonctionnement

DonJoy ActyLight® fournit un retour proprioceptif et travaille avec des éléments de soutien pour stabiliser la cheville et limiter l'amplitude des mouvements.

- **Les montants semi-rigides bilatéraux** assurent une stabilité mécanique pour prévenir l'inversion/éversion de la cheville
- **Les sangles en forme de 8** permettent un contrôle supplémentaire de l'inversion et de l'éversion de la cheville
- **Maillage de l'avant-pied en matériau respirant** pour fournir un soutien proprioceptif et compressif pour le pied

ARBRE DÉCISIONNEL CHEVILLE





enovis™

Creating Better Together™

INFORMATIONS DE COMMANDE



DESCRIPTION	CIRCONFÉRENCE DU TALON	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
DONJOY ACTYLIGHT® - XS	≤ 27 cm	32 - 36	82-0054-1	0190446755203
DONJOY ACTYLIGHT® - S	27 - 30 cm	36 - 39	82-0054-2	0190446764472
DONJOY ACTYLIGHT® - M	30 - 34 cm	39 - 43	82-0054-3	0190446764489
DONJOY ACTYLIGHT® - L	≥ 34 cm	43 - 47	82-0054-4	0190446764496

Prescrire : **DonJoy ActyLight®**

DONJOY®



Retrouvez-nous en ligne

WEB | BLOG | DJO SELECT | CEFARTENS



Enovis™ - DJO France S.A.S.
| C.E.F. | 3 rue de Bethar | 64990 Mouguerre | France

© Enovis™ - DJO France S.A.S. - MKGBS760 - Rev A - 09/2023 - DonJoy Actylight est un dispositif médical de classe I qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO LLC - USA.
* Créer Mieux Ensemble.

