

DONJOY[®]

DonJoy ActyLight[®]

Fit-and-forget enkelbrace



enovis[™]



DONJOY®

DonJoy ActyLight®

Fit-and-forget enkelbrace

Het gemak en comfort van de DonJoy ActyLight® enkelbrace zorgen ervoor dat patiënten vergeten dat ze hem dragen. Het instapontwerp en het vergrendelbare vetersysteem zorgen voor een snelle, veilige pasvorm die wordt aangevuld door een paar uitneembare anatomische versterkers. De eenvoudige aanpasbaarheid maakt zowel acuut als chronisch gebruik mogelijk, zodat ActyLight® de patiënt tijdens hun hele behandeling kan ondersteunen.

Indicaties

DonJoy ActyLight® is ontworpen om de enkel te ondersteunen en stabilizeren.

- Initiële behandeling van chronische enkelinstabiliteiten
- Milde tot matige verstuiking van de laterale band
- Geïsoleerde syndesmotische blessures (graad 1)
- Terugkeer naar sport, preventie van nieuwe blessures
- Ligament instabiliteit
- Supinatie preventie

Kenmerken en voordelen



Step-in ontwerp voor snel en gemakkelijk aan- en uittrekken.



Veilig vetervergrendelingsmechanisme maakt precies aantrekken mogelijk, helpt een consistente pasvorm te behouden en maakt snel losmaken mogelijk.



Lichtgewicht, ademend materiaal helpt de voet koel en droog te houden voor een betere compliance.



Straps in 8-vorm bieden controle over inversie/eversie.



Anatomisch gevormde bilaterale versterkingen bieden extra stabiliteit, bescherming en kunnen worden verplaatst om de juiste pasvorm te garanderen.




Dankzij het modulaire ontwerp kan de brace eenvoudig worden aangepast voor acuut of chronisch gebruik door de versterkingen te verwijderen.



Past comfortabel in een sportieve schoen zodat patiënten actief kunnen blijven.





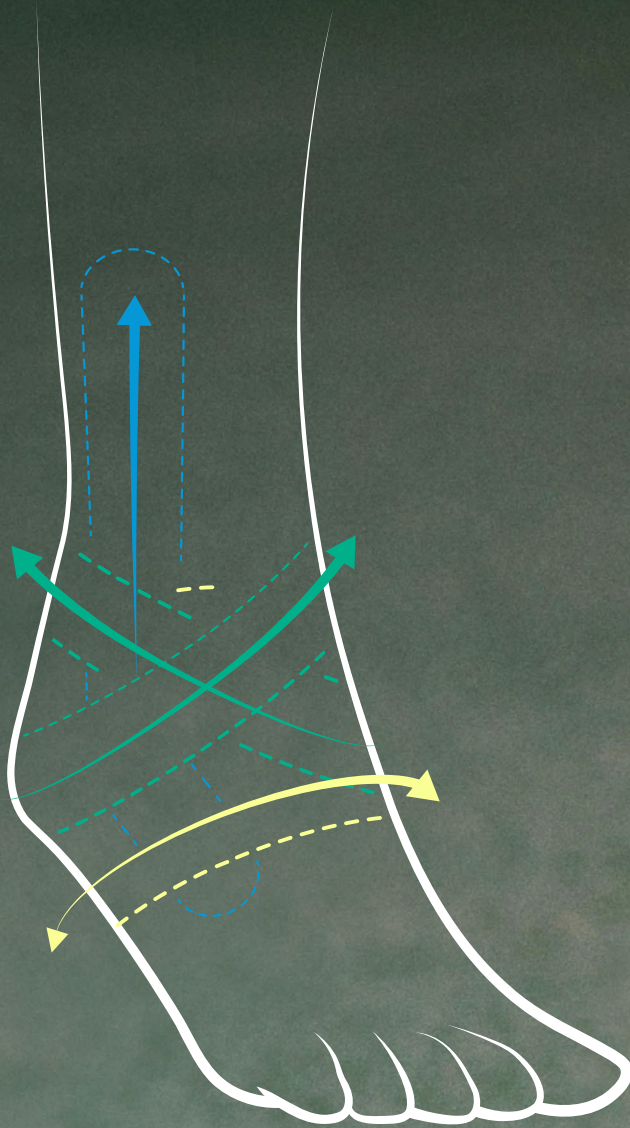

Hoe het werkt

Het step-in-sleeve ontwerp van ActyLight® geeft proprioceptieve feedback en werkt samen met ondersteunende elementen om de enkel te stabiliseren en overmatige bewegingsvrijheid te beperken.

- **Bilaterale semi-rigide** versterkingen bieden mechanische stabiliteit
- **Straps in 8-vorm** voorkomen inversie/eversie van de enkel
- **Geperforeerd materiaal ter hoogte** van de voorvoet geeft compressieve en proprioceptieve ondersteuning van de enkel


BESLISSINGS GRAFIEK







Creating Better Together™

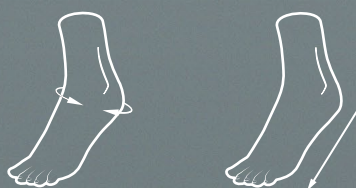

BESTELINFORMATIE

ARTIKELNUMMER	HIELOMTREK	SCHOENMAAT	ARTIKELCODE	GTIN CODE
DONJOY ACTYLIGHT® - XS	≤ 27 cm	32 - 36	82-0054-1	0190446755203
DONJOY ACTYLIGHT® - S	27 - 30 cm	36 - 39	82-0054-2	0190446764472
DONJOY ACTYLIGHT® - M	30 - 34 cm	39 - 43	82-0054-3	0190446764489
DONJOY ACTYLIGHT® - L	≥ 34 cm	43 - 47	82-0054-4	0190446764496

DONJOY®

Enovis™ - DJO Benelux BVBA
| Kleinhoefstraat 5 | bus 39 | 2440 Geel | België

enovis.be

