

enovis™

DONJOY®

OA GO®

**ALIVIO DEL DOLOR
CON UN GIRO**



DONJOY®

OA GO®

ALIVIO DEL DOLOR CON UN GIRO

Todos conocemos la importancia de mantenernos activos, especialmente a medida que envejecemos, pero cuando el dolor se interpone en el camino, a veces eso puede ser más fácil decirlo que hacerlo.

OA GO® de DonJoy® ayuda a proporcionar alivio del dolor y problemas de movilidad causados por la osteoartritis leve a moderada de la rodilla. Con un simple giro de un dial, este innovador soporte de rodilla suave, con sistema de descarga, de tres puntos, descargar rápidamente compartimento afectado para ayudar a aliviar el dolor y facilitar el movimiento.

OA GO es una combinación de manga y envoltura de perfil bajo y ligero que se desliza sobre la pierna para una fácil aplicación. Su lateral flexible se conecta a un sistema de cables controlado por diales duales BOA®; simplemente gire para lograr el nivel necesario de descarga ¡y estás listo para empezar!

Por eso, ya sea que la actividad signifique pasear por el campo, subir las escaleras de una galería o jugar en el jardín con los nietos, este soporte es una invitación a seguir adelante.

USO PREVISTO/INDICACIONES

- Osteoartritis de compartimento único leve a moderada (medial o lateral)
- Inestabilidad general de la articulación de la rodilla debido a la edad
- Condiciones de rodilla varo-valgo que pueden beneficiarse del descargue unicompartmental

1. Ramsey DK, Russell ME. Unloader Braces for Medial Compartment Knee Osteoarthritis: Implications on Mediating Progression. *Sports Health - A Multidisciplinary Approach*. 2009;1(5):416-426.

2. Mistry DA, Chandratreya A, Lee PYF. An Update on Unloading Knee Braces in the Treatment of Unicompartmental Knee Osteoarthritis from the Last 10 Years: A Literature Review. *Surg J (N Y)*. 2018 Jul 2;4(3):e110-e118



CARCASAS
FLEXIBLES

BOA® DIAL

ALMOHADILLA CONDILAR

ARTICULACIÓN FLEXIBLE

BOA DIAL

RECUBRIMIENTOS FLEXIBLES



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

COMFORT



Almohadillas condilares anatómicamente contorneadas: Se adhieren a la anatomía de la rodilla para una mejor distribución de la presión. Se incluyen dos grosores diferentes (10 mm y 13 mm) de almohadilla condilar para ayudar al ajuste individual y la comodidad para anatomías variadas.



Bandas antideslizantes: Colocadas en la parte superior del muslo para evitar el desplazamiento del soporte y mantener un ajuste cómodo.



Tejidos transpirables, elásticos y antibacterianos: Ayudan a la comodidad, cumplimiento y higiene, permitiendo períodos prolongados de uso. No fabricado con látex de caucho natural. La sección posterior de lycra proporciona comodidad adicional y libertad sobre la fosa poplítea.

FACILIDAD DE USO




Diseño híbrido de manga/envoltura: Mitad envoltura, mitad manga, OA GO® combina los beneficios de ambos para hacer que el ajuste sea rápido y fácil. Simplemente abra la sección del muslo y luego tire de la sección inferior de la manga sobre la pantorrilla antes de asegurar el soporte con el cierre de velcro.



Ajuste preciso y liberación rápida: Los diales gemelos multidireccionales BOA® Li2 proporcionan un ajuste preciso diseñado para funcionar en las condiciones más difíciles. Gire en sentido de las agujas del reloj y al revés para apretar y aflojar de forma independiente las áreas del muslo y la pantorrilla, o tire hacia arriba para una liberación rápida.



Lengüeta de agarre fácil: Facilita la rápida y sencilla sujeción y liberación de la placa de bloqueo, y se dobla hacia abajo para evitar enganches.

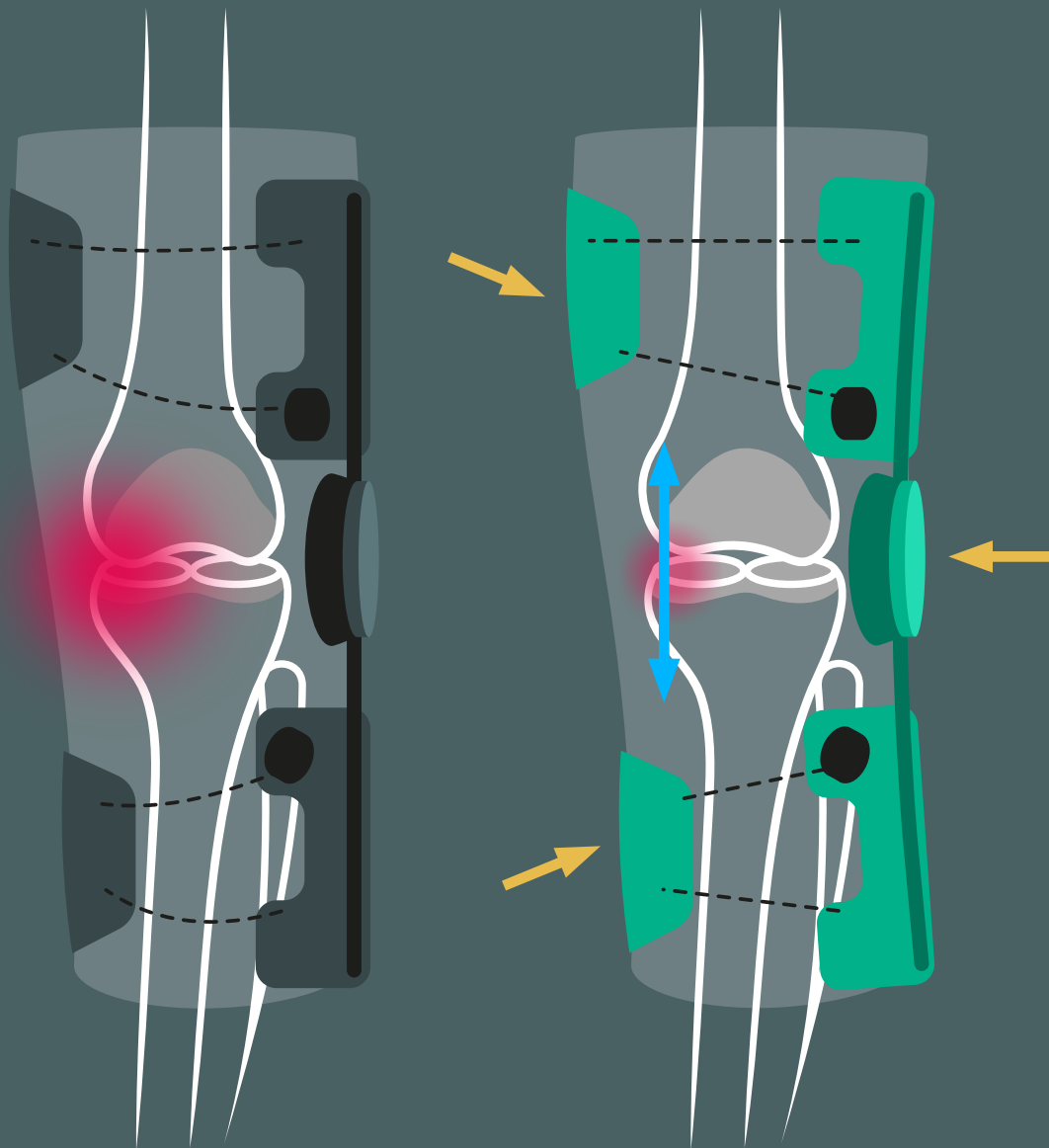


SISTEMA ÚNICO DE 3 PUNTOS DE PALANCA

El sistema de ajuste patentado de OA GO utiliza diales BOA® ajustables para controlar el nivel de tensión dentro de sus dos bucles de cable. Esta tensión reorienta los elementos flexibles del soporte para crear un sistema de palanca de tres puntos que descarga el compartimento afectado y ayuda a proporcionar alivio.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

REFERENCIA		CIRCUNFERENCIA DE MUSLO		TALLA
DERECHA MEDIAL/ IZQUIERDA LATERAL	IZQUIERDA MEDIAL/ DERECHA LATERAL			
82-7428-1	82-7429-1	33 – 39 cm	13 – 15 ½"	XS
82-7428-2	82-7429-2	39 – 47 cm	15 ½ – 18 ½"	S
82-7428-3	82-7429-3	47 – 53 cm	18 ½ – 21"	M
82-7428-4	82-7429-4	53 – 60 cm	21 – 23 ½"	L
82-7428-5	82-7429-5	60 – 67 cm	23 ½ – 26 ½"	XL
82-7428-6	82-7429-6	67 – 75 cm	26 ½ – 29 ½"	XXL

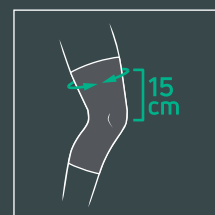

Medida tomada a 15 cm por encima del centro de la rótula.



DONJOY®

enovis™

Creating Better Together™

enovis.es

Carretera d'Esplugues, 225 2º B, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, ESPAÑA

Los resultados individuales pueden variar. Ni Enovis, DJO, LLC ni ninguna de sus subsidiarias ofrecen consejos médicos. El contenido de este documento no constituye asesoramiento médico, legal ni de ningún otro tipo de profesión. En su lugar, consulte a su profesional de la salud para obtener información sobre los posibles tratamientos que puedan ser apropiados para usted. BOA® es una marca registrada de Boa Technology.